
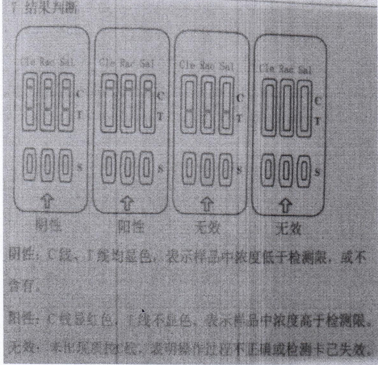
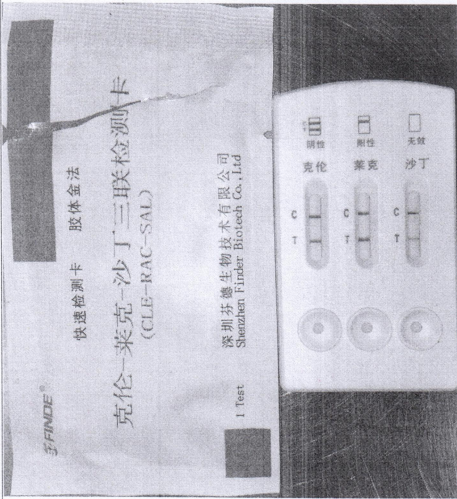


## 深圳元初总仓瘦肉精快速检测结果

样品名称	元初肉铺 梅柳	生产日期	2021-10-6
检测时间	2021-10-6	检测人	吴志强
检测项目	瘦肉精（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）		
检测内容	判定标准	 <p>结果判断</p> <p>阴性：C线、T线均蓝色，表示样品中浓度低于检测限，或不含有。</p> <p>阳性：C线显红色，T线不显色，表示样品中浓度高于检测限。</p> <p>无效：未出现质控线，表明操作过程不正确或检测卡已失效。</p>	
实际检测结果	检测结果图片		
结论	2021-10-6 批次元初肉铺 梅柳检测结果为合格。		

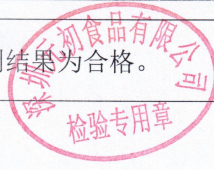


2021-10-6 深圳元初总仓氟苯尼考快速检测结果

样品名称	元初谷物蛋	生产日期	2021-10-4
检测项目	鸡蛋兽药氟苯尼考		
检测内容	判定标准	实际检测结果	
氟苯尼考	<p><b>7 结果判断</b></p> <p><b>阴性 (-):</b> 在检测窗内, 对照线 (C) 出现紫红色线, 检测线 (T) 显色与对照线一致或更深, 表明样本中氟苯尼考浓度低于 0.2ppb 或无氟苯尼考。</p> <p><b>阳性 (+):</b> 在检测窗内, 对照线 (C) 出现紫红色线, 检测线 (T) 不显色或比对照线浅, 表明样本中氟苯尼考浓度高于 0.2ppb。</p> <p><b>无效:</b> 在检测窗内, 对照线 (C) 不出现紫红色线。</p> 		
判定	阴性		
结论	2021-10-4 批次元初谷物蛋氟苯尼考检测结果为合格。		

检测人: 吴志强

备注: 氟苯尼考检测限 0.2ppb (ng/ml)。

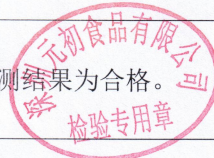

## 深圳元初总仓生鲜产品检测报告

检测日期：2021年10月6日

序号	样本名称	包装日期	吸光度	抑制率%	定性	供应商
1	澳洲甜橙	2021-10-6	0.8978	2.00%	阴性	佳沃
2	四川红心猕猴桃	2021-10-6	0.9559	2.06%	阴性	上海林谷鲜
3	甜心柿饼	2021-10-6	0.7149	1.58%	阴性	鹏升实业
4	烟台红富士苹果	2021-10-6	1.0113	2.16%	阴性	源兴果品
5	黑钻石葡萄原箱	2021-10-6	0.9504	1.99%	阴性	大连元初
6	月露流星蜜瓜	2021-10-6	0.8014	1.60%	阴性	阳光庄园
7	会理软籽石榴	2021-10-6	0.7335	1.32%	阴性	金刀卯
8	阳光玫瑰青提	2021-10-6	0.564	13.50%	阴性	金刀卯
9	供港 枸杞叶	2021-10-6	0.7565	1.71%	阴性	高超
10	供港 淮山	2021-10-6	1.0069	2.22%	阴性	高超
11	供港 芥兰苗	2021-10-6	0.8999	1.36%	阴性	高超
12	娃娃菜	2021-10-6	0.9515	2.06%	阴性	永佳
13	蟹味菇	2021-10-6	0.8878	1.93%	阴性	永佳
14	有机胡萝卜	2021-10-6	0.8294	1.87%	阴性	成武金石
15	有机生菜	2021-10-6	0.8741	1.94%	阴性	鑫茂
16	供港 四季葱	2021-10-6	0.8367	1.86%	阴性	全发
17	供港 长豆角	2021-10-6	0.799	1.75%	阴性	全发
18	供港 菜心	2021-10-6	0.5992	8.10%	阴性	全发

检测项目：有机磷及氨基甲酸酯类农药

检测方式：酶抑制率法：（GB/T5009.199-2003）

抑制率是指酶的安全指数，抑制率大于50%的为农药残留超标。

检测人：唐先锋

检验专用章